



Panel Sequence data の変異解析結果を閲覧する方法(遺伝性腫瘍検体の事例)


- 1、Login ID およびパスワードを入力して Variant analysis result page へログイン後、画面左の“Variant Analysis”をクリックします。

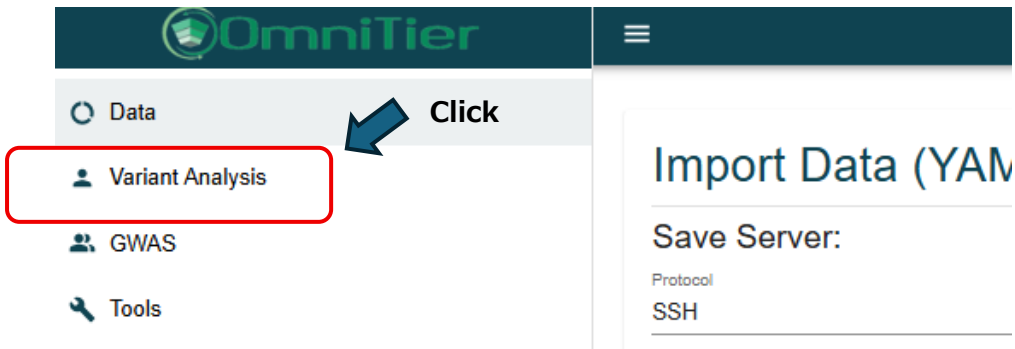

- 2、Variant Analysis Page が表示されるため、ページ内の Action カラムからいずれかのサンプルの菱形アイコンをクリックしてサンプルの解析結果をロードします。

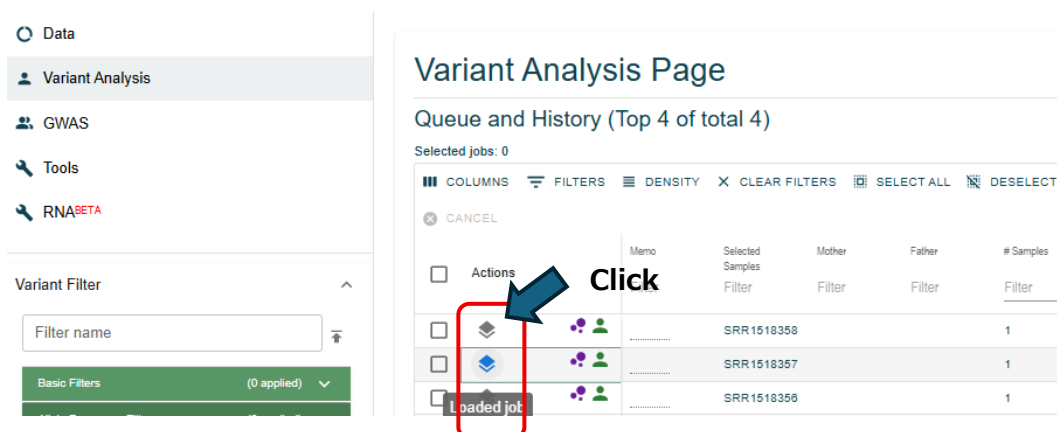

- 3、サンプルの Variant table が表示されたら、“CLEAR FILTERS”をクリックしてすべての Variant を表示し、“Gene Panel Filter”のプルダウンから breast cancer の Gene Panel を選択します。

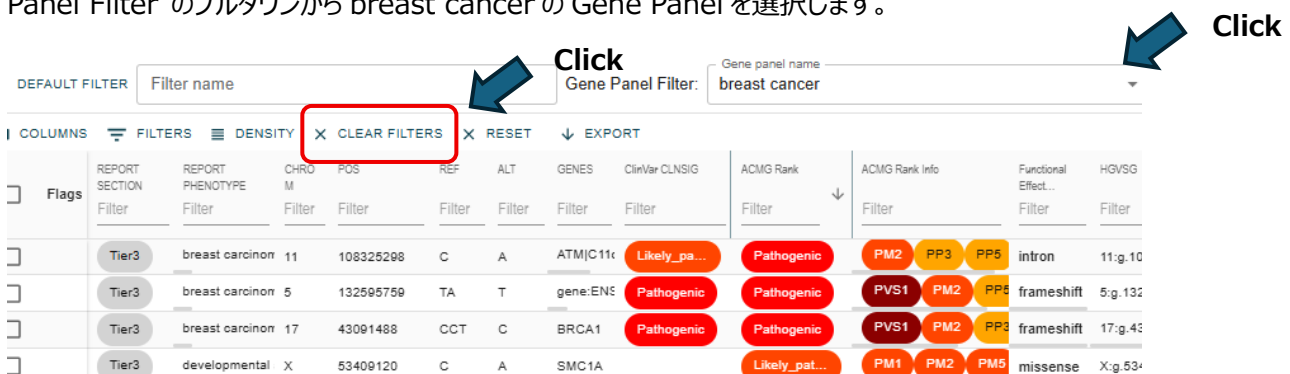

以上の操作で Panel sequence の対象遺伝子のみの Variant table が表示されます。